

# シンチレーションスペクトロメータ SEB-01-150

AKP (Atom Komplex Prylad) 社製

SEB-01-150

SEB-01-150はシンチレーション検出器を備えたベータ線スペクトロメータです。

食品や水、土壌などの様々な物質のβ線核種(ストロンチウム等)を高感度に計測し、核種ごとの測定値を表示いたします。

## 【用途】


農産物、水産物、各種生鮮食品、腐葉土、水、土壌、加工食品、等の放射能計測

## 【特徴】

- ・多くの前処理を必要としないユニークかつ画期的なβ線スペクトロメータ
- ・Cs-137等のβ線放出核種も同時に計測可能
- ・スペクトル表示、各種分析専用ソフト"AKWin"付属



SEB-01-150 (PC・分析専用ソフトウェア付属)

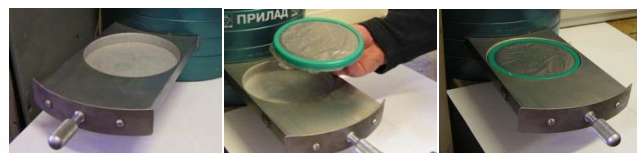

試料測定



## 【導入実績】合計 100台以上

### <導入事例・設置場所>

ウクライナ国内

- ・衛生管理局
- ・乳製品工場
- ・全国の牧場、食肉流通センター
- ・薬品製造工場
- ・港の輸出入管理部門

### <用途>

- ・食品の放射能安全検査
- ・乳製品の放射能安全検査
- ・食肉の放射能安全検査
- ・薬品の放射能安全検査
- ・輸出入食品の放射能安全



本機器で市場ラボの食品放射能安全検査実施の光景  
ウクライナ

- ★ AKP は国際品質マネジメントシステム規格 ISO 9001:2001 認証取得企業です。
- ★ AKP 製品はIAEAに採用され、国際連合やアメリカ、カナダ、CIS諸国に導入されています。
- ★ 国際電気標準会議(IEC)規格に準拠しています(IEC 61453 Ed.2)。

## 仕様 (SEB-01-150)

### 測定項目

β線スペクトロメータ

### 検出器種類

シンチレーション検出器 (Ø150mm x 150mm)

### 検出限界値

(密度=1、放射線量率 $\leq 0.15 \mu\text{Sv/h}$ 、信頼度  
95%、160ml容器で、測定時間2時間)  
Sr-90:0.8Bq K-40:1.6Bq Cs-137:0.9Bq

### 測定時間の目安

35Bq/kg (L) : 1050秒 (約17分)

### Sr-90の場合

※試料の状態等で変化します。

20Bq/kg (L) : 3000秒 (約50分)

### MCAチャンネル数

1023ch

### 測定線種

β線 : 0.06 MeV ~ 3.0 MeV

### 寸法 : 重量

Ø410mm x 500mm : 220kg (PC 含まず)

### 仕様温度範囲

+10°C ~ +35°C

### 電源 : 消費電力

AC110V※変圧器付属 (50/60Hz) : ~250W

## 製品構成

検出器本体 1台

鉛シールド (壁厚 50mm)

専用PC (Windows7 Professional  
32bit 英語版)

スペクトル分析ソフト “AkWin”

160ml、10ml 測定容器 各10個

エネルギー校正用線源 1個  
(Sr-90 ※天然放射性物質ではございませんので、  
紛失しないようご注意ください。)

日本語取扱説明書

接続ケーブル一式

## 支援体制



一貫したユーザーサポートとして当社では機器の使い方に関するセミナーやオペレータ研修コースをご用意しています。

受講の他に放射能測定を実体験していただいています。

放射能測定器のお見積・ご購入のお問い合わせ

株式会社 サードウェーブ 安全環境事業部

TEL:03-5298-2085

FAX:050-3488-7852

[www.envsafe-web.com](http://www.envsafe-web.com)